

АППАРАТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА

VACU**EXPERT**

GÉZATONE

ПОЛНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ВАШЕГО ЛИЦА И ТЕЛА!



2 в 1
ЛИЦО и ТЕЛО




Артикул: 1301028

АППАРАТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА
VACUEXPERT

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

GÉZATONE

Вакуумный массажер Gezatone VACU EXPERT прост в использовании и предназначен для массажа лица и тела. С помощью аппарата Вы сможете в домашних условиях обеспечить себе и Вашим близким качественный вакуумный массаж, предотвратить появление и развитие многих косметических проблем, улучшит внешний вид и состояние Вашей кожи. Проведение процедур не занимает много времени, не требует специальной подготовки и дорогостоящих компонентов.

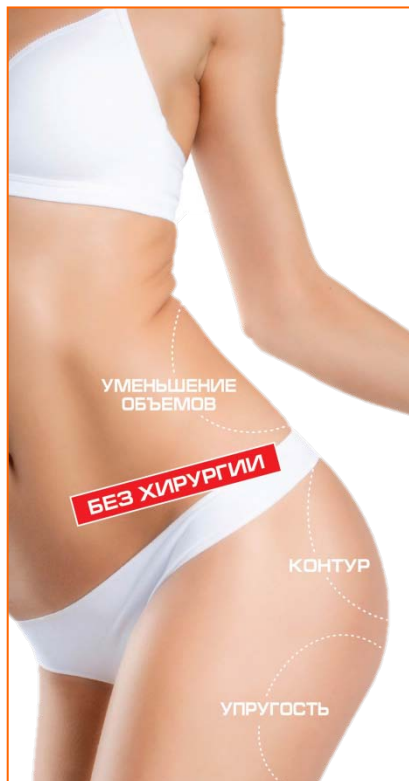

- ✓ Разглаживание морщин
- ✓ Повышение тонуса кожи
- ✓ Профилактика старения
- ✓ Укрепление кожи, уменьшение морщин
- ✓ Устранение отеков, одутловатости и выведение избыточной жидкости
- ✓ Снятие стресса и спазма мышц
- ✓ Стимуляция обменных процессов
- ✓ Коррекция целлюлита любой стадии
- ✓ Уменьшение избыточных жировых отложений
- ✓ Создание стройного силуэта



АППАРАТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА

VACU**EXPERT**

GÉZATONE

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ


- 🍊 Избыточный вес
- 🍊 Все стадии и типы целлюлита
- 🍊 Дряблая кожа со сниженным тонусом
- 🍊 Интенсивная физическая нагрузка
- 🍊 Синдром хронической усталости.




Артикул: 1301028

Вакуумный массаж – один из самых эффективных и физиологичных методов, который используется для коррекции фигуры, повышения тонуса и подтяжки кожи, как лица так и тела. Использование вакуумного массажа позволяет тщательно проработать ткани и мышечные структуры, которые не доступны для обычных видов массажа.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВАКУУМНОГО МАССАЖА

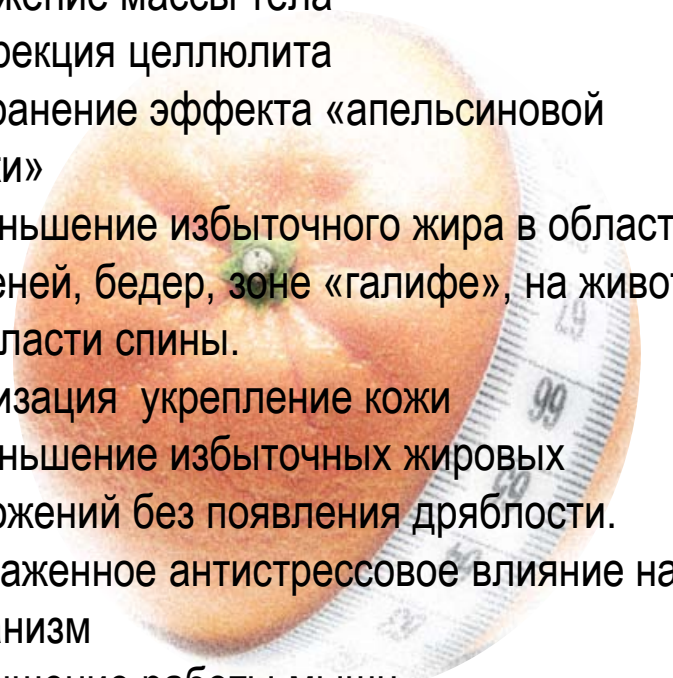- Снижение массы тела
 - Коррекция целлюлита
 - Устранение эффекта «апельсиновой корки»
 - Уменьшение избыточного жира в области коленей, бедер, зоне «галифе», на животе, в области спины.
 - Тонизация и укрепление кожи
 - Уменьшение избыточных жировых отложений без появления дряблости.
 - Выраженное антистрессовое влияние на организм
 - Улучшение работы мышц
- 

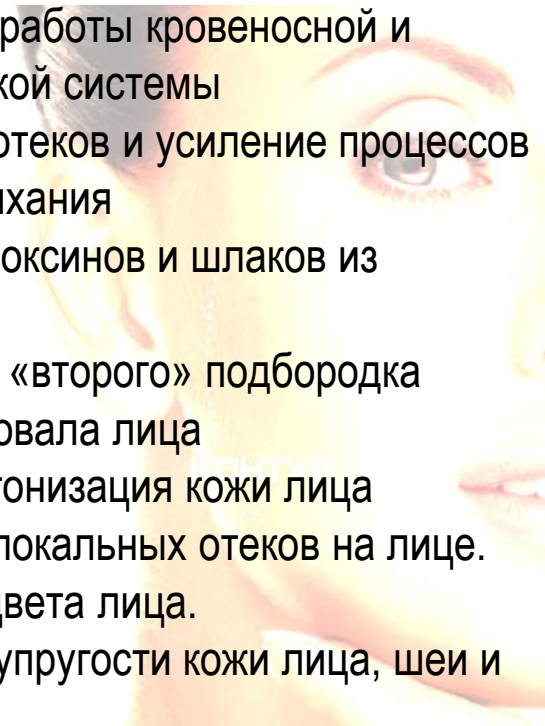- Стимуляция работы кровеносной и лимфатической системы
 - Устранение отеков и усиление процессов тканевого дыхания
 - Выведение токсинов и шлаков из организма
 - Уменьшение «второго» подбородка
 - Укрепление овала лица
 - Подтяжка и тонизация кожи лица
 - Устранение локальных отеков на лице.
 - Улучшение цвета лица.
 - Повышение упругости кожи лица, шеи и декольте.
- 

АППАРАТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА

VACU EXPERT

VACU EXPERT
НАСАДКИ

1. Уникальная насадка для массажа лица
2. Малая баночная насадка диаметром 30 мм- процедуры для лица и тела
3. Средняя баночная насадка диаметром 60 мм-процедуры для различных участков тела.
4. Большая баночная насадка диаметром 100 мм – процедуры для спины, живота и груди.
5. Насадка вакуумно - роликовая для интенсивного моделирующего массажа тела.

Используйте **VACU EXPERT GÉZATONE** для быстрого и великолепного преображения Вашего лица и тела.



АППАРАТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА
VACUEXPERT

GÉZATONE

ПОЛНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ВАШЕГО ЛИЦА

АППАРАТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА
VACUEXPERT
2 в 1
лицо и тело

КОНТУР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ ПРЯМО У СЕБЯ ДОМА!

ПРОЦЕДУРЫ: ГОЛОВА • СПИНА • БЕДРА • РУКИ • ЖИВОТ • ЛОСЖ. ВАКУУМНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ.

АППАРАТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА
VACUEXPERT
2 в 1
лицо и тело

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ

БЕЗ ХИРУРГИИ

КОНТУР

УПРУГОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ ПРЯМО У СЕБЯ ДОМА!

ПРОЦЕДУРЫ: ГОЛОВА • СПИНА • БЕДРА • РУКИ • ЖИВОТ • ЛОСЖ. ВАКУУМНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ.

И ТЕЛА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимание! Перед началом использования аппарата следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

1. Вакуумный массаж нельзя проводить по сухой коже!
2. Перед процедурой удалите с кожи декоративную косметику, примите душ, для усиления эффекта рекомендуется провести пилинг кожи скрабом.
3. Нанесите на кожу массажный крем или массажное масло.
4. Выберите одну из 5 насадок в зависимости от области тела подлежащей воздействию. Не используйте вакуумно-роликовую насадку для лица груди и области декольте.

Внимание! Не прикладывайте чрезмерных усилий при смене насадок!

5. Выберите программу воздействия с помощью переключателя P1, P2, P3 или P4.
6. Длительность процедур не должна превышать 30 минут.

АППАРАТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА

VACU EXPERT

ПРОГРАММЫ

- **Программа «P1»**

Для проработки деликатных зон (лицо, шея, декольте) для людей с чувствительным типом кожи.



- **Программа «P2»**

Программа со средней интенсивностью воздействия для проработки рук, ног, талии и ягодиц.

- **Программа «P3»**

Программа с высокой интенсивностью воздействия для проработки проблемных областей, целлюлитных и жировых зон.

- **Программа «P4»**

Программа с непрерывным воздействием. Используется для проработки областей с жировыми отложениями и целлюлитом.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

ВИДЫ МАССАЖА

Вакуумный массаж лица и шеи




Вакуумный массаж декольте

Вакуумный массаж верхней части тела

Вакуумный массаж брюшной полости

Вакуумный массаж талии

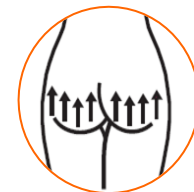

Вакуумный массаж ягодиц

Вакуумный массаж ног и бедер

Антицеллюлитный вакуумный массаж

Антистрессовая процедура.

АППАРАТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА

VACU EXPERT

GÉZATONE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ VACU EXPERT объединяет вакуумное воздействие с моделирующим массажем для превосходного результата!
- ✓ Уникальная насадка для массажа лица
- ✓ Вакуумно-роликовая насадка для моделирующего массажа тела.
- ✓ Плавная регулировка вакуумного воздействия, наличие программ.
- ✓ Повышенная мощность.
- ✓ Профессиональный массаж.

ВЫГОДЫ

- ✓ Идеально подходит для массажа любой части тела: лифтинговый омолаживающий массаж лица, а также зон рук, живота, спины, ягодиц, бедер, ног.
- ✓ Проста и легкость использования.
- ✓ Надежность
- ✓ Эффективность
- ✓ Комфорт
- ✓ Видимый результат



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы с выраженной сердечно-сосудистой недостаточностью
- Онкологические заболевания.
- Нарушения свертываемости крови.
- Почечная и печёночная недостаточность.
- Варикозная болезнь, тромбофлебит.
- Кожные заболевания (дерматит экзема и т.п.)
- Нарушение целостности кожных покровов (раны, свежие операционные швы).
- Беременность.

АППАРАТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА

VACU**EXPERT**

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

GÉZATONE

АРТИКУЛ	1301028
Количество программ	4
Напряжение питания	DC 4.2В, 800 мА
Источник питания встроенный (аккумулятор)	Li-ION акк. 3.2В, 600 мА*ч
Или сетевой адаптер	DC 4.2В, 800 мА
Время зарядки аккумулятора	5-6 часов
Регулировка интенсивности	плавная
Максимально создаваемое разрежение	50кПа
Размеры в упаковке	215 x 225 x 105 мм
Вес в упаковке	830 г.
Диапазон рабочих температур	+18...35°C при влажности 25...85%

GÉZATONE
VACUExpert



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МОСКВА: (495) 925-00-34

РЕГИОНЫ РФ (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ): 8-800-200-00-34

www.sozv.ru

info@sozv.ru

